

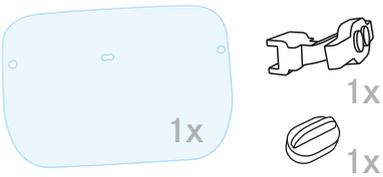



Lieferumfang  
Scope of delivery

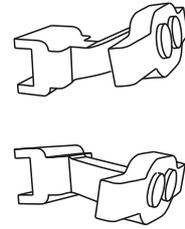

1

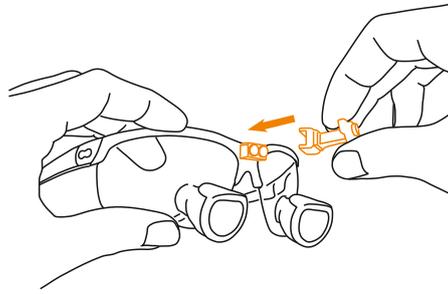


2

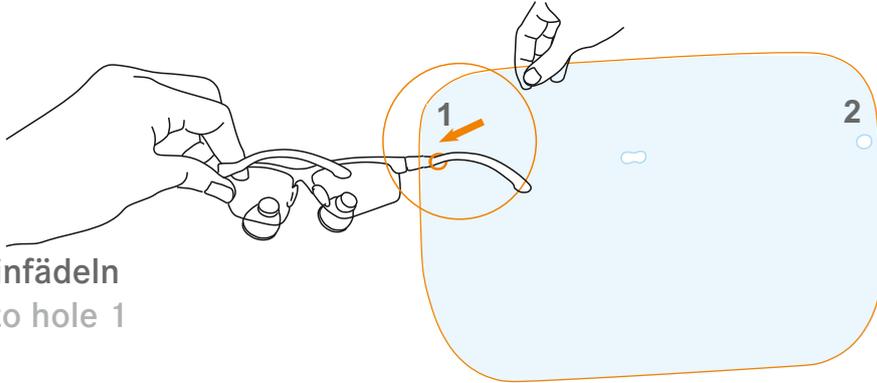


Loch 1 einfädeln  
Insert into hole 1

3


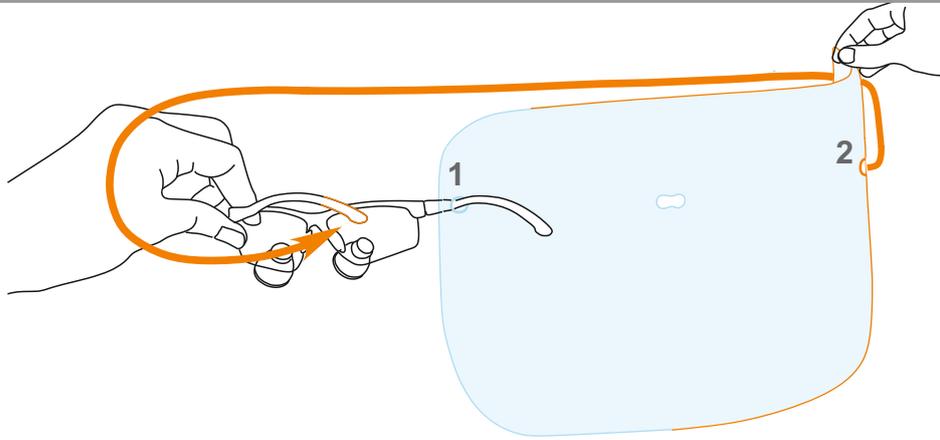


4

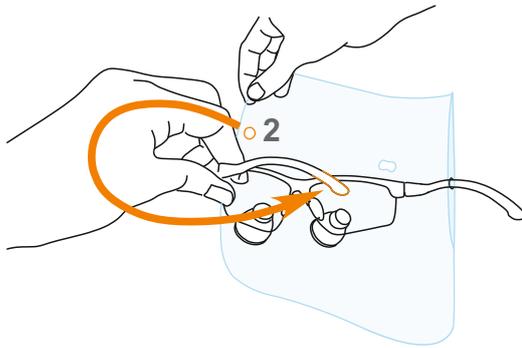


6a

Umdrehen  
Turn

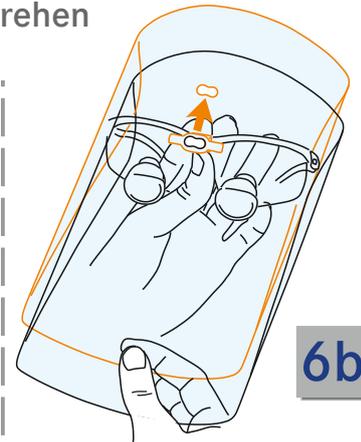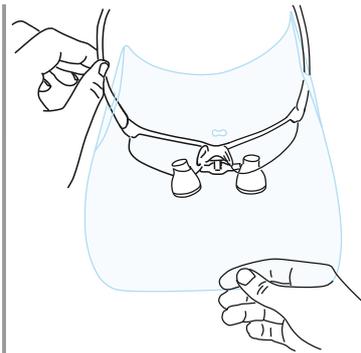


6b

5

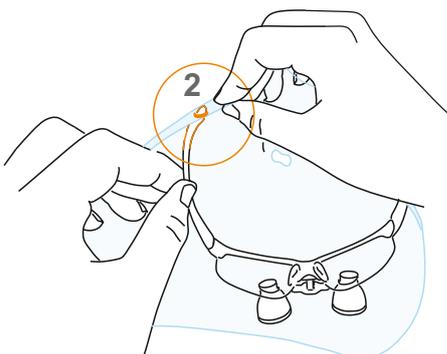

7

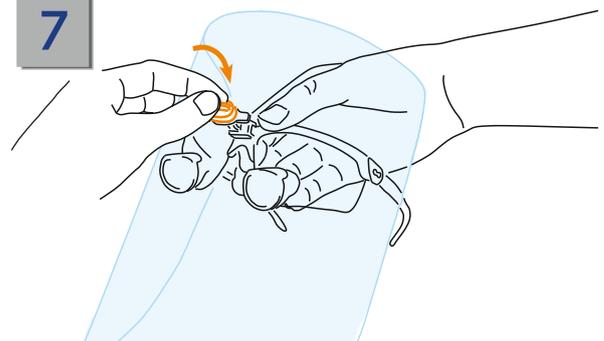

Loch 2 einfädeln  
Insert into hole 2



## REINIGUNG UND DESINFEKTION

Eine Reinigung sollte unmittelbar nach der Verwendung des **protect-on** geschehen, um zu verhindern, dass sich Blut- oder Proteinrückstände verfestigen.

1. Magnetkappe, Gesichtsschutzfolie und Magnetsteg abnehmen.  
Gesichtsschutzfolie ordnungsgemäß entsorgen.
2. Eventuelle Rückstände an Magnetkappe und –steg mit einem milden Reinigungsmittel abwischen; ggf. Rückstände des Reinigungsmittels mit feuchten, fusselfreien Einmaltüchern entfernen.  
  
Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion nur weiche Tücher und keine scharfen oder kratzenden Gegenstände.
3. Wischdesinfektion von Magnetkappe und –steg mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten Tuch durchführen. Lassen Sie das Desinfektionsmittel gemäß Angaben einwirken.

**Hinweis:** Verwenden Sie zur Desinfektion die unten aufgeführten Produkte.

4. Eventuelle Rückstände des Desinfektionsmittels mit sterilen, feuchten, fusselfreien Einmaltüchern entfernen.
5. Mit einem sterilen, fusselfreien Einmaltuch trockenreiben und gut trocknen lassen.

**VORSICHT:** Die Gesichtsschutzfolien sind ausschließlich zum Einmalgebrauch vorgesehen und dürfen nicht wiederverwendet werden.



Die Teile des **protect-on** sind **nicht** autoklavierbar. Die dabei entstehenden Temperaturen würden diese zerstören.



## CLEANING AND DISINFECTION

Cleaning should be carried out immediately after use of the **protect-on** to prevent blood or protein residues from solidifying.

1. Remove the magnetic cap, face protection foil and magnetic bar.  
Dispose face protection film properly.
2. Wipe off any residue from the magnetic cap and bar with a mild detergent; if necessary, remove residues of the detergent with damp, lint-free disposable cloths.  
  
Only use soft cloths for cleaning and disinfection and no sharp or scratching objects.
3. Wipe disinfection of the magnetic cap and bar with a cloth moistened with disinfectant. Allow the disinfectant to take effect as specified.

**Note:** Use the products listed below for disinfection.

4. Remove any residues of the disinfectant with sterile, damp, lint-free disposable cloths.
5. Dry thoroughly with a sterile, lint-free disposable cloth.

**CAUTION:** The face protection foils are intended for single use only and must not be reused.



The parts of the **protect-on** are **not** autoclavable. The resulting temperatures would destroy them.



### Mittel zur Desinfektion – Disinfection agents

Innocid DW-i Desinfektionstücher / Innocid DW-i Disinfection wipes  
PRISMAN Pharma International AG; Am Stalden 16; CH-4622 Egerkingen

Omnizid Sprüh- und Wischdesinfektion / Omnizid Spray and wipe disinfection  
OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH; Gutenbergring 7-9; D-63110 Rodgau

Bacillol® Tissues  
BODE Chemie GmbH; Melanchthonstraße 27; D-22525 Hamburg

